


モードを切り替えることで、さまざまな便利な機能が利用できます。モード切替スイッチで切り替えることができます。



多機能 選択 簡単

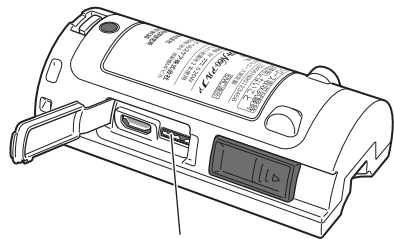

モード切替スイッチ

※芯が出ていないシャープペンシルの先など、固くて細いものを使ってください。

● 簡単 モード（出荷時の設定）

血糖測定と過去の測定結果の確認のみ行えます。

● 選択 モード

選択した機能だけが使用できます。

● 多機能 モード

過去の測定結果の確認のほか、測定や機器に関する設定など、すべての機能が使用できます。

参考 設定されたモードは、季節画面の左下に表示されます。

参考 各モードで使用できる機能については、49ページ「便利な機能の一覧」を参照してください。